

NOTICE D'UTILISATION

MASQUE DE LUMINOTHERAPIE LED POUR LE VISAGE ET LE COU

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce masque de luminothérapie LED pour le visage et le cou. Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1 - Ce produit n'est pas ignifugé, veuillez le tenir à l'écart du feu ou des liquides corrosifs.
- 2 - Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même.
- 3 - Veuillez le garder hors de portée des enfants.
- 4 - Ce produit possède une fonction étanche.
- 5 - Ne le pressez pas fortement pour éviter toute déformation et panne.
- 6 - La lumière bleue ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

A PROPOS DU MASQUE LUMINOTHÉRAPIE LED

Ce produit utilise la technologie de guidage de la lumière émanant de la nanotechnologie pour former différentes ondes lumineuses à l'échelle nanométrique.


Ce produit dispose de quatre couleurs de lumière :

- IR (infrarouge) à 850 nm : pour pénétrer les tissus dermiques en profondeur.
- Lumière rouge à 630 nm : pour régénérer le collagène.
- Lumière bleue à 415 nm : pour réduire l'acné.
- Lumière jaune à 605 nm : pour rajeunir la peau.

Trois traitements en fonction de vos besoins :

- Thérapie par lumière infrarouge (invisible) et lumière rouge : pour améliorer la circulation et la production de collagène.
- Thérapie par la lumière bleue pour la réduction de l'acné et la purification de la peau.
- Thérapie par la lumière orange pour une peau plus éclatante et la santé générale de la peau.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

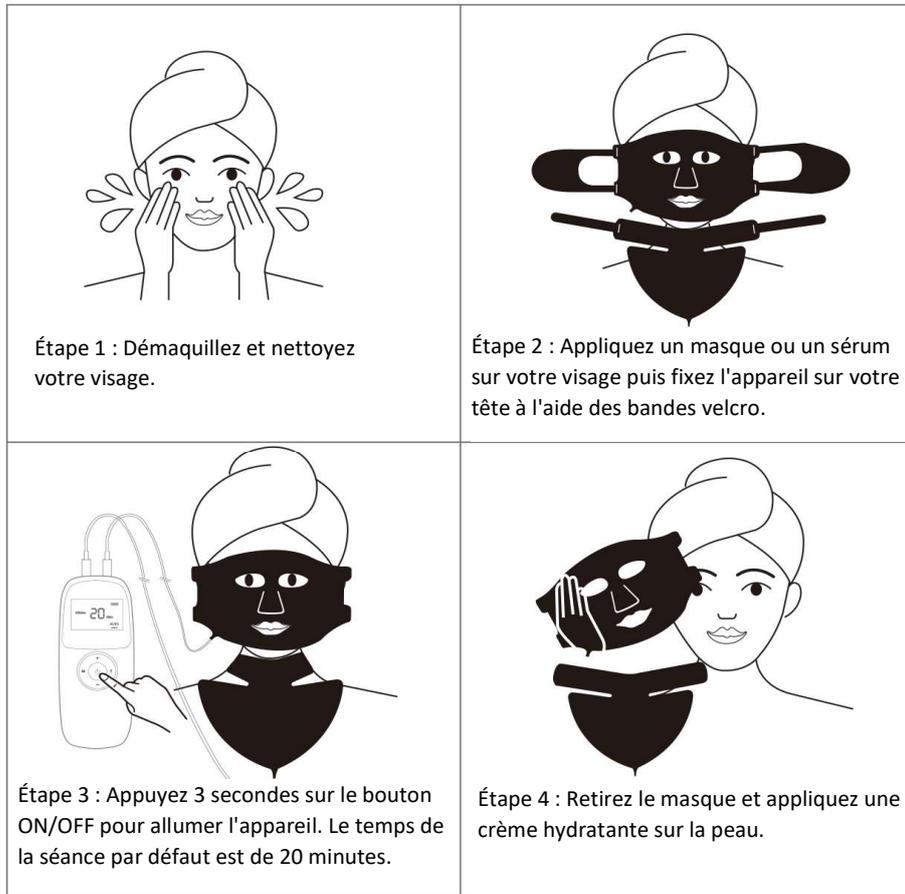

FONCTIONNEMENT

ON/OFF : appuyer longuement sur la touche ON/OFF (2 secondes) de la télécommande pour allumer l'appareil ou l'éteindre.

Quand l'appareil est allumé, il suffit de sélectionner la couleur avec la touche **M** de la télécommande et d'appuyer sur les touches **T+ ou T-** (Programmation du temps) pour régler le temps de fonctionnement de l'appareil. A chaque pression brève sur la touche **T** la durée change. 5 options s'offrent à vous : 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes et 30 minutes. Le masque s'éteindra à la fin de cette durée.

Réglage de l'intensité lumineuse

Quand l'appareil est allumé, appuyez sur la touche **E** pour régler la luminosité de l'éclairage (3 intensités possibles).

Choix des 7 couleurs

En appuyant sur la touche **M** vous pourrez sélectionner les différentes couleurs du masque. Rouge, bleu, jaune, vert, violet, bleu clair, orange.

- La lumière rouge (640 nm) permet la régénération des cellules en profondeur, répare la peau abîmée, lutte contre les rides ou ridules et favorise la production de collagène et d'élastine.
- La lumière bleue (423 nm) agit sur les problèmes d'acné et la régulation du sébum grâce à ses propriétés bactéricides.
- La lumière verte (532 nm) éclaircit les taches d'hyperpigmentation et booste le teint.
- La lumière jaune (583 nm) est utilisée pour calmer les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique.
- La lumière orange (590 nm) allie les avantages des lumières jaune et rouge pour revitaliser la peau et fait ressortir l'éclat du teint.
- La lumière violette (400 nm) : elle permet de traiter l'acné et les cicatrices de l'acné en profondeur. Pour un traitement efficace, la lumière violette émet des rayons UV en faible quantité, sans danger pour la peau.
- La lumière bleu clair (510 nm): le bleu clair (cyan) accélère le métabolisme.

Fonction infrarouge

Vous pouvez utiliser la fonction infrarouge en plus de n'importe quelle couleur en appuyant sur la touche **NIR** de la télécommande.

- La lumière infrarouge invisible (850 nm) aide à améliorer la circulation et la production de collagène. Elle pénètre les tissus dermiques en profondeur pour favoriser la circulation sanguine et procurer à la peau un éclat immédiat

Rechargement de la batterie

Lorsque le voyant de la batterie commence à clignoter, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée. Veuillez alors à connecter votre appareil à une source d'alimentation dès que possible pour garantir une utilisation ininterrompue.

Utilisation

Il est recommandé d'utiliser le masque de rajeunissement de la peau 3 à 5 fois par semaine.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit : masque de luminothérapie pour visage et cou

Tension de fonctionnement : 3.7V

Tension de charge : DC5V 1A

Puissance : 25W

LED : masque 92 LED / cou 78 LED

Taille du produit : masque visage : 315*219*5 mm / cou : 325*247*5 mm

Poids net : masque visage 230 g / cou 200 g

Capacité : 2600mAh

Matériau : Silicone

Contenu du packaging : masque facial et cou, sangles, Télécommande, câble, câble USB, protection des yeux

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

- 1 - L'appareil ne s'allume pas : Appuyez longuement pendant 3 secondes sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'appareil. Vérifiez que votre appareil est bien chargé.
- 2 - La LED ne s'allume pas : Assurez-vous que le port USB est correctement connecté à l'appareil.
- 3 - La fiche/prise USB est défectueuse : Réinsérer la fiche et remplacer la prise USB en cas de besoin.
- 4 - Mise hors tension automatique : Appuyez longuement pendant 3 secondes sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'appareil / Rechargez l'appareil en cas de besoin.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

